



Návod k použití **nastavitelná klika pro bicyklové ergometry a** **ergometry pro horní část těla**



1 Obecné




Před prvním použitím si pečlivě přečtete tento návod k použití se všemi bezpečnostními pokyny a upozorněními, **abyste** zajistili bezpečné a správné používání. Tento dokument si uschovejte pro budoucí použití a v případě předání spotřebiče jej předejte dalším osobám.

2 Přehled

- Cyklus: Poloměr nastavitelný v rozmezí 75 až 175 mm
- Číslo položky: Z-EF-AL-011/ Z-MED-AL-011 (lékařská verze)
- Tělo: poloměr nastavitelný v rozmezí 75 mm až 225 mm, možnost přepnutí z asynchronní do synchronní polohy rukojetí.
- Vyrobeno výhradně z nerezové oceli odolné proti korozi a kyselinám.
- Bezpečné a snadné nastavení - bez použití nářadí
- Extrémně robustní konstrukce

längenverstellbares Kurbelset Z-MED-AL-011

adjustable crank arm set

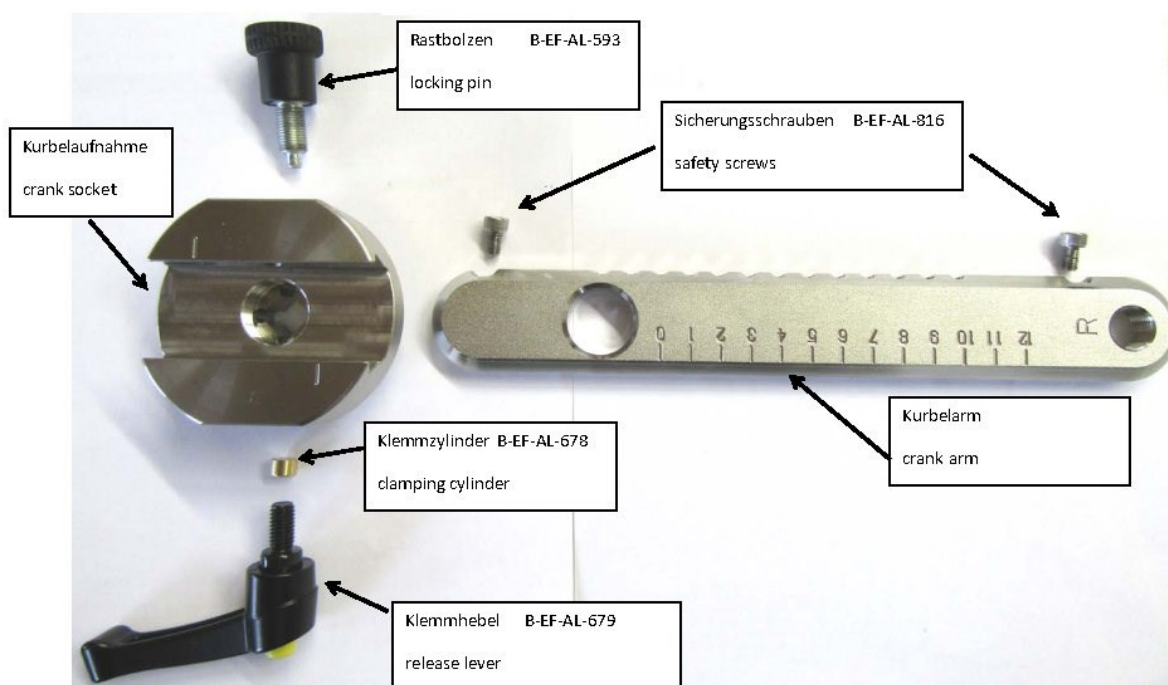

Komponenten ohne Artikelnummer können nicht separat gekauft werden, sondern gehören zu einem kompletten Kurbelset

Parts without article number are not sold separately. They are only available as part of a set of adjustable crank arms

3 Péče a údržba

Upozornění: Znovu utáhněte kliky a pedály.

Po prvních 10 hodinách provozu je třeba kliky a pedály dotáhnout. Pokud nejsou pedály a kliky dotaženy, může dojít k poškození osy, klik nebo pedálu a v takovém případě již neplatí záruka.

4 Návod k montáži

4.1 Nářadí potřebné k montáži:

- Šroubovák s drážkou malý
- Otevřený klíč SW 15 / 17 / 19
- Šestihranná zásuvka SW 14
- Stahovák kliky
- Momentový klíč nastavený na 60 Nm

4.2 Krok 1 - Demontáž pedálů

Demontujte pedály na levé a pravé straně pomocí otevřeného klíče SW15. **Pozor:** Na levé straně se šroubové spojení otevírá v UZS, na pravé straně proti UZS.

4.3 Krok2 - Povolení šroubového spojení klik s osou

Pomocí malého šroubováku s drážkou odstraňte malou černou plastovou krytku na pravé a levé straně, která zakrývá šroubový spoj kliky. Nyní povolte šroubové spoje na obou stranách pomocí momentového klíče a šestihranného nástrčného klíče SW. 14.

4.4 Krok 3 - Stažení klik z nápravy

Ručně našroubujte stahovák do závitu na upevnění nápravy. Otáčejte 17šroubem stahováku v UZS pomocí klíče SW, dokud se klika neuvolní, kliku lze nyní snadno vyjmout. Stahovák vyjměte z kliky pomocí otevřeného klíče SW19 a otočením proti UZS jej vraťte do původní polohy. Stejně postupujte i u kliky na druhé straně.

4.5 Krok 4 - Montáž nastavitelných klik


Odstraňte černé krytky z otvorů obou klik. Pokud kliky ještě nejsou nastaveny do polohy o, uveďte je do potřebné polohy o pro montáž otevřením upínací páky a zatažením za uvolňovací tlačítko. Kliky jsou označeny písmenem L pro levou stranu a písmenem R pro pravou stranu, ujistěte se, že jsou ve správné poloze, jinak může dojít k uvolnění pedálů. Umístěte kliku s písmenem L na levé straně na čtverec osy. Nyní zašroubujte dříve demontovaný šroub zpět do nápravy pomocí momentového klíče a utáhněte jej na 60 Nm. Totéž proveďte na druhé straně.

4.6 Krok 5 - Montáž pedálů

Pedály jsou také označeny L jako levý a R jako pravý. Při montáži dbejte na správnou polohu a na to, aby levá strana byla zašroubována proti UZS a pravá strana byla zašroubována do UZS. Pedály utáhněte velmi pevně, jinak se mohou uvolnit.

5 Použití klikové skříně

Jak je stručně⁴ uvedeno v tomto kroku, lze délku V-kliček nastavit uvolněním upínací páky (A) a vytažením zajišťovacího šroubu (B). Polohu kliky lze odečíst ze stupnice na boku. Po seřízení kliky je nutné se ujistit, že je aretační šroub (B) zajištěn a upínací páka (A) je zajištěna a vyrovnána s klikou (viz obrázek). Pro dosažení vyrovnané polohy upínací páky ji lze v uzamčené poloze mírně nadzvednout a uvést do požadované polohy. V opačném případě může dojít ke zranění uživatele nebo poškození kliky a stroje.

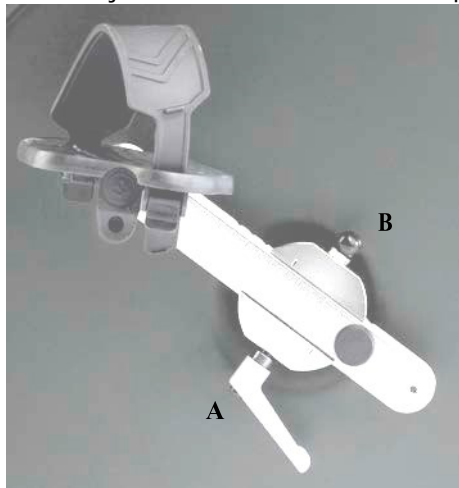

6 Záruka

To vychází ze zákonné záruky.

Společnost EMOTION FITNESS GmbH & Co KG jako distributor tohoto výrobku poskytuje profesionálním uživatelům bezplatný servis po dobu několika měsíců na náhradní díly a práci, pokud prokáží správné používání a péči uvedenou v tomto návodu.

Nárok na záruku zaniká, pokud byl výrobek servisován nebo opravován neoprávněnými osobami. Jakmile dojde k reklamaci, měli byste o tom neprodleně informovat společnost EMOTION FITNESS GmbH & Co KG. Vlastník zařízení musí poskytnout informace o sériovém čísle zařízení, době nákupu a zdroji dodávky.

Společnost EMOTION FITNESS GmbH & Co KG zajistí službu, ale vyhrazuje si právo určit její povahu.

V úvahu přicházejí následující postupy.

1. Servis provádí naše servisní oddělení přímo na místě.
2. Požadovaný náhradní díl vám zašleme.
3. Zašleme vám náhradní jednotku.

Vadné díly nám musí zákazník vrátit do 48 hodin. V opačném případě budou dodané náhradní díly účtovány.

Pokud příčiny leží mimo rámec záruky, vyhrazuje si společnost EMOTION FITNESS GmbH & Co. KG právo účtovat veškeré náklady na opravu.

Na některé opotřebitelné díly se záruka nevztahuje. Jedná se zejména o sedlo, kliky a jejich uchycení, pedály, řemínky na pedály, baterie, nášlapy, potahové látky a gumové úchyty na řídítkách. Na pulzní systémy Polar se vztahuje zákonná záruka.

Tato ustanovení o záruce se nijak nedotýkají obecných zákonných nároků.

Naše Všeobecné dodací podmínky, ve znění pozdějších změn, si můžete prohlédnout a stáhnout z našich webových stránek www.emotion-fitness.de.



emotion fitness GmbH & Co KG

Trippstadter Str. 68

67691 Hochspeyer

Tel 06305-71499-0

Fax 06305-71499-111

info@emotion-fitness.de

www.emotion-fitness.de

Výrobce EUDAMED SRN: DE-MF-000016584