

Használati utasítás a oldalon.



Lépcsőmászó a *motion cardio line 900 & motion cardio line 900 med*



motion stair 900
motion stair 900 med

Tartalom

1.	Általános.....	3
2.	Az eszközök osztályozása	3
3.	Biztonsági utasítások.....	4
	A berendezés biztonságos telepítése.....	4
	Biztonságos képzés.....	5
	Javallatok és ellenjavallatok	6
4.	A kijelző működtetése	7
	Áttekintés a kijelző/billentyű funkciókról	7
	Programválasztás	8
	Impulzus rendszerek	8
	Induktív töltés (opcionális).....	9
5.	Gondozás, karbantartás és szervizelés.....	9
	Hibaállapot-érzékelés (meghibásodás) útmutató.....	12
	Karbantartási utasítások az üzemeltető számára	12
	Karbantartás hivatalos szakember által	12
	Kalibrálás/karbantartás	13
6.	Műszaki adatok*	13
7.	Eltávolítás	13
8.	Garancia	14

1. Általános



Mielőtt először használná az edzőkészüléket, a biztonságos és megfelelő használat érdekében figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, az összes biztonsági utasítással és figyelmeztetéssel együtt. Őrizze meg ezt a dokumentumot a későbbi használatra, és adja át másoknak, ha továbbadja a berendezést.

A berendezés célja a kardiopulmonális tréning és a test reprodukálható terhelése, pl. diagnosztikai és terápiás intézkedésekhez. A készüléket elsősorban a kardiológián, a fizioterápiában, a sportorvoslásban és az otthoni használatban használják a felhasználók. Egy másik alkalmazás a vázizmok felépítésére és erősítésére, valamint az edzés során érintett ízületek mobilitásának növelésére szolgál.

A berendezés lehetővé teszi az emberi test és a szív- és érrendszer reprodukálható fizikai terhelését megelőzés, rehabilitáció és diagnózis céljából.

A szürke háttérű szöveg olyan szövegrészeket jelöl, amelyek kizárólag a fitnessvonal felszerelési jellemzőivel foglalkoznak.


2. Az eszközök osztályozása

- A *cardio line med* készülékek a 93/42 EWG irányelv **MD** szerint IIa osztályba sorolt orvostechnikai eszközök. A fék szabályozási tartományában a kijelző pontossága +/- 5%.
- A *cardio termékcsalád* készülékei megfelelnek a DIN EN ISO 20957-1 és DIN EN ISO 20957-5 szabványnak; S (kereskedelmi használat/studió) és H (otthoni használat) alkalmazási osztályú, A +/- 10 %-os pontossági osztályú, és kizárólag a fitness- és sportágazat számára készültek.


Egyszerre csak 1 személy edzhet a berendezéssel; a típustábla szerinti maximális felhasználói súlyt nem szabad túllépni.

3. Biztonsági utasítások


A berendezés biztonságos telepítése

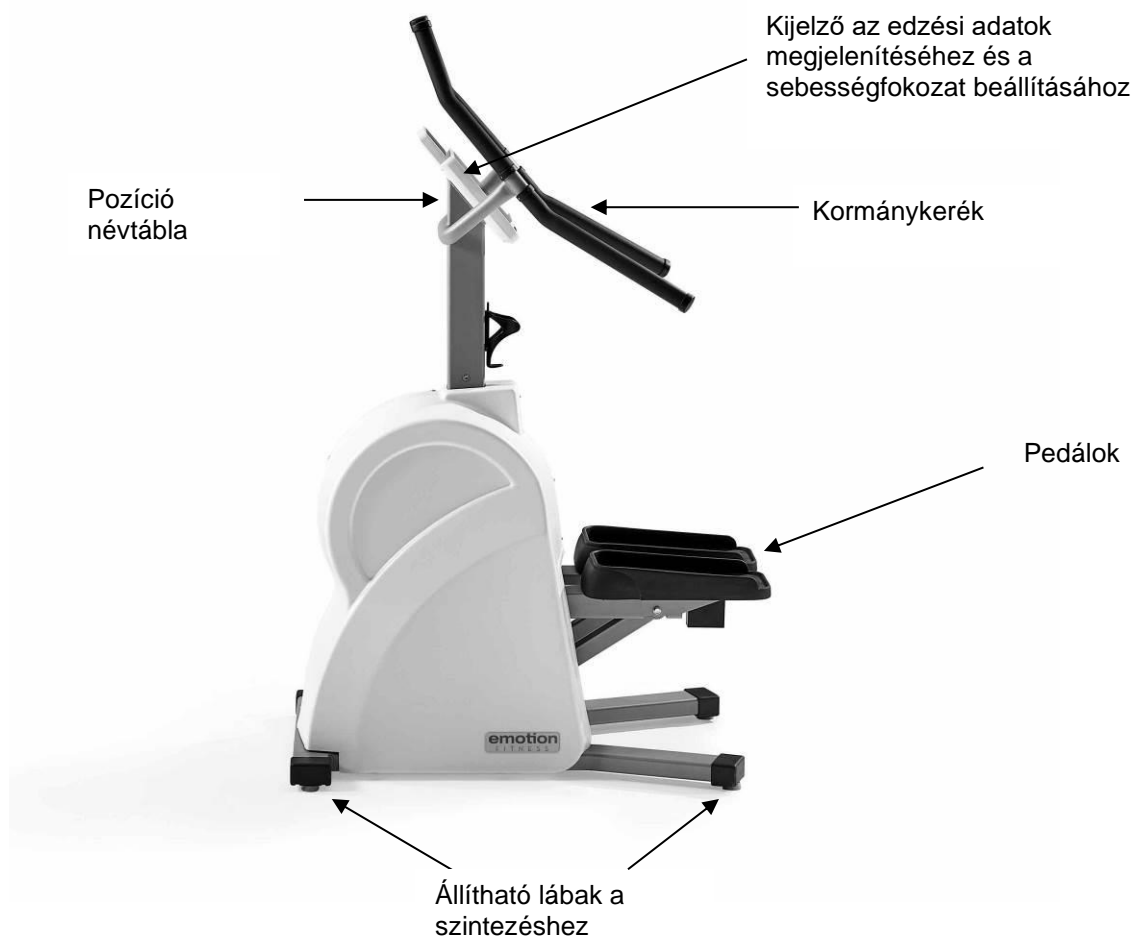

1. ábra: A készülék oldalnézetben, a lényeges elemek megnevezésével

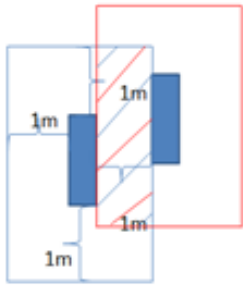



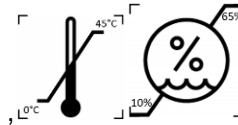

- Helyezze a készüléket egy szilárd, vízszintes, vízszintes és csúszásmentes felületre, és állítsa vízszintbe a készüléket az állítócsavarokkal úgy, hogy az ne inogjon.
- A készülék körüli szabad területnek legalább 1 m-rel nagyobbak kell lennie, mint a készülék mozgástartománya, hogy vész helyzetben is biztosítsa a készülék biztonságos megközelítését és elhagyását. A biztonsági távolságok azonban átfedhetnek egymást (lásd a képet).



- A készüléket csak száraz helyiségben helyezze el a „10%” és „65%” címen.
- Győződjön meg róla, hogy nincs elektromágneses sugárzás, pl. rádióantennák, sugárzó fénycsövek stb. által kibocsátott sugárzás, mivel ezek befolyásolhatják az impulzusmérést.
- A keret aljának mindig szabadnak kell lennie a megfelelő szellőzés érdekében.
- Az összes itt említett egység hálózattól független. Működés közben maguk állítják elő az áramot, vagy a programozás során a szabványos beépített kondenzátor látja el őket energiával. A kondenzátort képzéssel töltik fel, és élettartama > 20000 ciklus.
- Figyelem: Kérjük, mindig tartsa be a jelen kézikönyv 5. fejezetében található ápolási, karbantartási és szervizelési utasításokat.

Biztonságos képzés

- Az edzés megkezdése előtt egy erre felhatalmazott személynek, például orvosnak ellenőriznie kell az edzésre való alkalmasságot. Kérjük, vegye figyelembe az "Indikációk és ellenjavallatok" pontot.
- Vegye figyelembe, hogy a túlzott testmozgás káros lehet.
- Ha hányinger vagy szédülés jelentkezik, azonnal hagyja abba az edzést, és forduljon orvoshoz.
- A felszerelésen csak ép bőrrel szabad edzeni.
- Edzéskor előnyös a szűk, könnyű sportruházat, hogy edzés közben ne akadjon be a készülék részeibe. Mindig viseljen megfelelő sportcipőt, hogy biztos lábakon álljon a pedálokon.
- A képzés megkezdése előtt ellenőrizze a készüléket a biztonságos állás, a meghibásodott alkatrészek vagy az esetleges manipulációk szempontjából. Ha bármilyen hibát talál, vagy nem biztos benne, kérdezze meg a felügyelőt, mielőtt elkezdene a képzést.
- Az edzés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy senki sem tartózkodik a mozgó alkatrészek közelében, hogy elkerülje harmadik személyek veszélyeztetését. Mindenekelőtt a felügyelet nélküli gyermekeket távol kell tartani a berendezéstől.
- **Vigyázat:** A lépcsőfokokat, amelyeken a felhasználó a gyakorlat során áll, megfelelően erős rugók húzzák fel a felső kiindulási helyzetbe. A lábak hátraugrásából eredő sérülések elkerülése érdekében a felhasználónak a következő módon kell felkapaszkodnia a gépre
 - Álljon a készülék elé, és kezeivel kapaszkodjon a kormányba.
 - Először tegye egyik lábát a pedálra, és nyomja le a padlóig.
 - A testsúlyt teljesen erre a pedálra helyezi át.
 - Most a másik lábával nyomja a másik pedált a padlóhoz.
 - Mindkét pedál le van kapcsolva
 - Most kezdje el mozgatni mindkét lábát, és lépjen be a lépcsőmozgás funkcionális területére. Ha helyesen csinálod, akkor nem fogod a pedállal a felső vagy az alsó végpontot eltalálni.
 - Ha újra abba akarja hagyni az edzést, hagyja magát mindkét pedállal lecsúszni, amíg a földet nem érinti.
 - Most hagyják, hogy egy pedál lassan feljöjjön, elegendő ellennyomást gyakorolva.
 - Ha a pedál a felső megállásnál van, akkor tegye le a lábát a padlóra a készülék előtt, és a másik pedált ugyanúgy fékezve engedje felfelé mozogni.
 - Ha a második pedál is a megálló tetején van, vegye le a lábát a pedálról.
 - Gyakorolja többször a gépre való fel- és leszállást, hogy biztonságosan tudja használni - még akkor is, ha az edzés miatt már elfáradt.

-  **Figyelmeztetés:** A pulzusmérő rendszer meghibásodásra hajlamos a rendszer miatt. A túlzott edzés veszélyes sérülésekhez vagy halálhoz vezethet. Ha rosszul érzi magát, azonnal hagyja abba az edzést, és forduljon orvosához vagy terapeutájához.
-  **Figyelmeztetés: A készüléket** csak házzal és száraz helyiségben szabad üzemeltetni.
-  **Figyelmeztetés az opcionális tápcsatlakozásra vonatkozóan:** Csak az IEC 60601-1 szabvány szerint bevizsgált és a készülék gyártója által jóváhagyott tápegységeket használjon. Ügyeljen arra, hogy a tápegységet úgy szerelje fel, hogy azt nehezen lehessen leválasztani (pl. padlótartályok, a készülék alá vagy kábelcsatornába történő beszerelés, a tápegység nehezen hozzáférhető helyeken történő elhelyezése).
-  **Figyelmeztetés:** Ha az orvostechikai eszközt módosítják, megfelelő vizsgálatokat és tesztekkel kell végezni a további biztonságos használat biztosítása érdekében. Ne módosítsa az eszközt a gyártó engedélye nélkül.

Javallatok és ellenjavallatok

Az edzés megkezdése előtt kérjük, konzultáljon orvosával vagy terapeutájával, hogy megbizonyosodjon az edzésre való alkalmasságról.

Példa jelzésekre

- A mozgásszervi rendszer mozgékonyága
- Az izomzat erősítése
- A szív- és érrendszer erősítése

Példa ellenjavallatokra

- Szív- és érrendszeri betegségek
- A mozgásszervi fájdalom
- A képzés során:
 - Mellkasi fájdalom
 - Malaise
 - Hányinger
 - Szédülés
 - Légszomj

Kérdezze meg orvosát, ha gyógyszert szed.

4. A kijelző működtetése

Három vagy kilenc edzésprogram lehetővé teszi az egyéni és változatos edzést a motion stair 900 és motion stair 900 med készülékekkel.

	lépcső 900 / 900 med
Alapfelszerelés	Gyorsindítás, időzített edzés, pulzus edzés
programcsomaggal együtt	Gyorsindítás Minősítés Pulzus képzés + 6 további program

Áttekintés a kijelző/billentyű funkciókról



Kezdőlap gomb



PAUSE



STOP

PLAY

2. ábra: Monitor nézet, a gombok funkcióinak magyarázata, a tényleges nézet színei eltérhetnek, a gombok hozzárendelése azonos.

A gombok magyarázata:

- A **Kezdőlap gomb** egy fizikai gomb a kijelzőüveg alatt. Megnyomásával léphet be a főmenübe. A HOME gomb hosszú ideig (legalább 6 másodpercig) történő megnyomásával a monitor elektronikája visszaáll.
- Nyomja meg a **PAUSE** gombot (⏸) az edzés szüneteltetéséhez.
- A **PLAY** gomb (▶) megnyomásával elindul vagy folytatódik a képzés.
- A **COOL** gomb (❄️) azonnal leállítja az edzést. Az edzés eredményeinek összefoglalója azonnal elkészül, megjelenik, és szükség esetén elküldi egy kompatibilis edzésvezérlő szoftverhez.
- A **"+" vagy "-" billentyűvel** növelheti vagy csökkentheti a beállítandó paramétereket vagy teljesítményértékeket.
- A **nyílbillentyűkkel** navigáljon a megfelelő menükben, és erősítse meg az értékeket vagy beállításokat.
- A programválasztékban való navigálás a lapozással/húzással történik.

A programtól függően a következő paraméterek közül néhány megjelenik:

- A program neve.
- Idő: Befejezett vagy hátralévő edzésidő.
- Pulzus: pulzusszámjelző, ha kompatibilis pulzusmérő övet használ. A pulzusjelző kijelzőn a cél- vagy maximális pulzusszámmal rendelkező programoknál az aktuális pulzustartományt mutatja. A kijelzőn megjelenő profiljelző az intenzitástartomány előrehaladását mutatja az edzés során.
- Watt: A teljesítmény wattban jelenik meg. Ezzel párhuzamosan az intenzitás a profilban lévő grafikus kijelzőn keresztül egyértelművé válik.
- km/h: A fiktív sebesség km/h-ban jelenik meg.
- Sebesség: Pedálfordulat percenként.
- L/R (nem a 900/900 med testtel): A bal és a jobb láb erőaránya itt jelenik meg %-ban.
- HRV: A pulzusszám-variabilitás az RMSSD értéken keresztül jelenik meg (**POLAR** H10 érzékelő szükséges).
- resp: Légzésszám (**POLAR** H10 érzékelő szükséges)

- km: Hozzáadott vagy fennmaradó távolság. A kijelzés méterben történik; 1000 m-től 10 m-es lépésekben (1,00 km).
- K-Cal: Hozzáadott vagy fennmaradó kalóriaelfogyasztás.
- Szint: 1 - 21 intenzitási szint.
- Ø: Ha a paraméterek ezzel a szimbólummal vannak kiegészítve, akkor azok átlagértékek.

Eredmények


Az edzésprogram befejezése vagy a COOL (❄️) segítségével történő idő előtti befejezés után az eredmények megjelennek a monitoron, és 3 perces lehűlés következik. Ez a HOME gombbal törölhető.

Az értékek egy része átlagolt (Watt, Km/h, fordulatszám, pulzus, magasság/perc), más része kumulált (km, K-Cal, idő, magasság). Az átlagértékeket az Ø szimbólummal jelöljük.

Ezek az eredmények lehetővé teszik a személyes teljesítmény fejlődésének nyomon követését, és így motivációként szolgálnak.

Programválasztás

A kívánt edzésprogram a főmenüben a megfelelő szimbólum megérintésével választható ki. Ezután a konfigurációs oldalra kerül, ahol beállíthatja a megfelelő edzési paramétereket. Nyomja meg a **PLAY** gombot (▶️) a bevitel megerősítéséhez és az edzés elindításához. A főmenübe a home ikon vagy a home gomb segítségével térhet vissza.

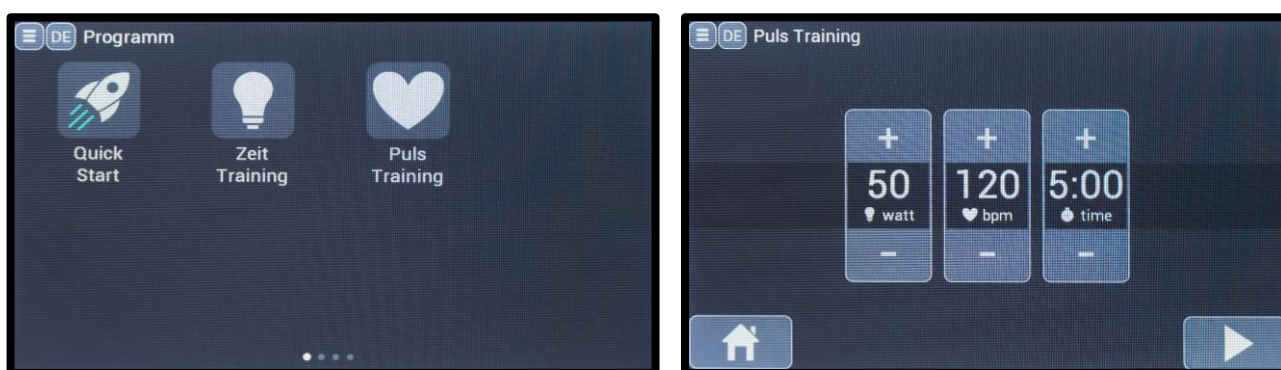

3. ábra: Programválasztás és konfiguráció a kézi képzéshez.

Impulzus rendszerek

A motion cardio line 900 és a motion cardio line 900 med készülékek az eredeti **POLAR** impulzusrendszerrel rendelkeznek, amelyben a jelgyűjtés alapfelszereltségként mellkaspánt segítségével történik. Ez lehetővé teszi az egyéni edzést különböző programokban. A vezeték nélküli adatátvitel a kijelző elektronikához kódolva történik (5kHz-en vagy a Bluetooth® oldalon keresztül). Az új **POLAR** "Auto-Pairing" technológia biztonságos és interferenciamentes Bluetooth-on keresztüli adatátvitelen alapul. Ez a technológia a H10 vagy H9 jeladók használatát igényli. Egyéb paraméterek, mint például a HRV és a légzésszám, szintén a Bluetooth® kapcsolaton keresztül kerülnek továbbításra a monitorra.

Ha a régi, pl. T31 kódolású adókat használnak, akkor a kompatibilitás lefelé érvényesül. Meg kell azonban jegyezni, hogy az 5 kHz-es technológián keresztül történő jelátvitelben interferencia léphet fel.

A villogó szív szimbólum színe jelzi a használt technológiát.

világoskék=Bluetooth zöld=5kHz



ANT+

A 900-as motion cardio line 900 és a 900 med motion cardio line készülékek a pulzusszám 5kHz/Bluetooth® útján

történő továbbítása mellett lehetővé teszik a ANT+ útján történő opcionális adatátvitelt is. Ehhez a teljesítménycsomag szükséges.

Alapértelmezés szerint a Polar 5kHz/Bluetooth® technológia aktiválva van. A ANT+ címen keresztüli átvitel aktiválásához az információs képernyőn () lévő "ANT+" kapcsolót be kell kapcsolni (itt sárgával jelölve). Ezt követően létre lehet

hozni a kapcsolatot egy olyan adóegységgel, amely a pulzusszámot a ANT+ címen keresztül küldi. A ANT+ oldalon keresztül történő pulzusszám-továbbítást egy sötétkék színű, villogó szív szimbólum erősíti meg.

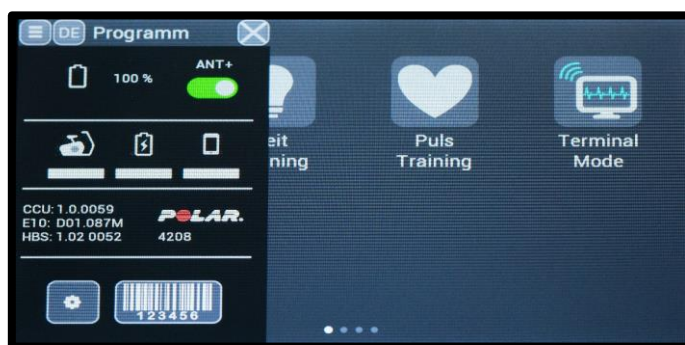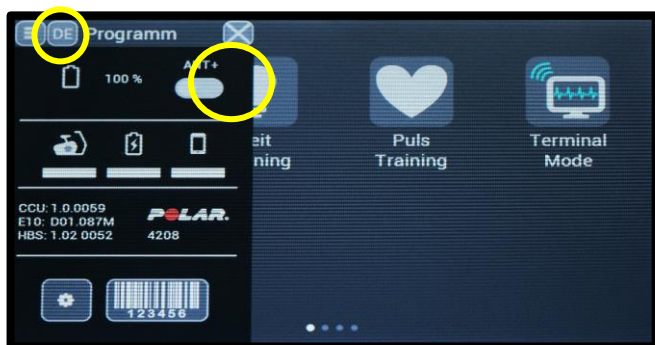

4. ábra: Az ANT+ aktiválása a pulzusszám továbbításához

Biztonsági utasítás a DIN EN ISO 20957 szabvány

Figyelmeztetés. A pulzuserő rendszerek pontatlanok lehetnek. A túlzott testmozgás súlyos egészségkárosodást vagy halált okozhat. Azonnal hagyja abba az edzést, ha szédülést vagy gyengeséget érez.

Induktív töltés (opcionális)

Az opcionális induktív töltőmodul minden motion cardio line 900 és motion cardio line 900 med egységen aktiválható a "connect csomag" segítségével. Ez lehetővé teszi a Qi szabványnak (Φ) megfelelő mobilkészülékek érintés nélküli töltését. A pacemaker vagy beültetett defibrillátor (ICD) viselőinek ajánlott legalább 10 cm távolságot tartaniuk a töltőtekercektől.


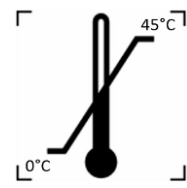





5. Gondozás, karbantartás és szervizelés

Az emotion fitness összes kardióberendezése tartós és kevés karbantartást igényel, hogy hosszú ideig edzőberendezésként működjön. A szükséges gondozást azonban feltétlenül lelkiismeretesen kell elvégezni.

⚠ Figyelmeztetés: A készüléket csak erre felhatalmazott szakember nyithatja ki.

Szimbólumok és jelentés

Biztonsági jel	Hivatkozás	Cím
	ISO 7010-P017	Tiltott tologatás
	ISO 7010-W012	Figyelmeztetés, elektromosság
	ISO 7000-1641	Használati utasítás
Sicherheitshinweis gemäß DIN EN ISO 20957 Warnung! Systeme der Herzfrequenzüberwachung können ungenau sein. Übermäßiges Trainieren kann zu ernsthaftem gesundheitlichem Schaden oder zum Tod führen. Bei Schwindel- Schwächegefühl sofort das Training beenden.	DIN EN ISO 20957	Biztonsági közlemény Szívfrekvencia-monitorozás
	ISO 7000-3082	Gyártó

	ISO 7000-2497	A gyártás dátuma
	ISO 7000-0632	Hőmérsékleti határérték
	ISO 7000-2620	Levegő páratartalma, korlátozás
	ISO 7010-W001	Általános figyelmeztető jel
	ISO 7010-M002	Kövesse a kezelési utasításokat
	IEC 60417-5840	B típusú alkalmazott rész (a nyeregre, a pedálokra és a kormányra vonatkozik)
	ISO 15233	Orvostechnikai eszköz

Az egységek biztonsági szintje csak akkor tartható fenn, ha az egységeket rendszeresen ellenőrzik a sérülések és az elhasználódás szempontjából. A hibás alkatrészeket azonnal ki kell cserélni, és a készüléket a javításig le kell állítani.

Hibadiagnózis

A következő hibaüzenetek jelenhetnek meg. Ha a hiba ismételten megjelenik, az alábbiakban felsorolt intézkedések segíthetnek. Ha ezek nem vezetnek eredményre, akkor a gyártóval és szükség esetén a szoftver gyártójával kell felvenni a kapcsolatot.

Hibaüzenet	Mérés/ek	Érintett egységtípusok
"RFID hiba"	<ul style="list-style-type: none">Az RFID-szám, azaz a transzponderen lévő szám túl rövid vagy túl hosszú.Hiba történt az RFID-szám beolvasása közben. → más transzpondert használjon	Minden ergométer
"Szívérzékelő?"	A monitor olyan programot akar indítani, amelyhez pulzuspólus-érzékelőt kell viselni. Ha nem talál érzékelőt, ez az üzenet jelenik meg.	Minden ergométer
"USB probléma"	A rádióüzenetet sikeresen elküldték a monitor rádiómoduljából a PC rádiómoduljába (azaz a vevőmodul visszaigazolta az üzenet fogadását), de a megadott idő elteltével a PC nem válaszolt: → Indítsa újra a számítógépet, és csatlakoztassa újra az USB-dongle-t a számítógéphez. Ha szükséges, indítsa újra a szoftverszolgáltatást.	Minden ergométer
"Rádió probléma"	<ul style="list-style-type: none">A készülék nem kap választ az USB-dongle-től. Figyelem! Ez a hibaüzenet akkor is megjelenhet, ha a dongle-ről a monitorra küldött üzenet hibás (pl. rossz formátumú vagy hiányos üzenet). → Indítsa újra a számítógépet, és csatlakoztassa újra az USB-dongle-t a számítógéphez. Ha szükséges, indítsa újra a szoftverszolgáltatást.	Minden ergométer
"NDEF err: length"	<ul style="list-style-type: none">Az NFC-címkén található üzenet (azaz az okostelefonról továbbított üzenet) túl hosszú. → Lépjen kapcsolatba a szoftver vagy az eszköz gyártójával	Minden ergométer
"NDEF err: verify"	<ul style="list-style-type: none">Az NFC-címkét nem lehetett elérni. Ez egy jogosultsági probléma, amikor a monitoron keresztül a szuper jelszó használatával hozzáfér az NFC-címkéhez. → Lépjen kapcsolatba a gyártóval vagy a szoftver gyártójával	Minden ergométer
Hiányzó érték: XX (XX=szám)	<ul style="list-style-type: none">Egy szükséges beállítási paramétert nem küldött el a számítógépes szoftver az ergométerre → Vegye fel a kapcsolatot a gyártóval vagy a szoftver gyártójával.	Minden ergométer
XX érték a tartományon kívül (XX=szám)	<ul style="list-style-type: none">Egy szükséges beállítási paramétert a megengedett tartományon kívül küldtek a PC-szoftverból a készülékre → lépjen kapcsolatba a gyártóval vagy a szoftver gyártójával.	Minden ergométer

Hibaállapot-érzékelés (meghibásodás) útmutató

Ha a berendezésen olyan hiba lép fel, amelyet nem tud besorolni, kérjük, forduljon az emotion fitness GmbH & Co.KG-hoz. Minden egyes hibaüzenethez tartsa készenlétben a meghibásodott készülék sorozatszámát és típusát, mivel ez fontos lehet ahhoz, hogy a helyes diagnózist el tudjuk végezni, és mindenekelőtt a megfelelő cserealkatrészeket biztosítani tudjuk Önnek!

Karbantartási utasítások az üzemeltető számára

Ideális esetben minden használat előtt, de legalább naponta ellenőrizze szemrevételezéssel a készüléket, és különös figyelmet fordítson a hibás alkatrészekre, laza csatlakozásokra és atipikus zajokra.

A következő ellenőrzéseket legalább 6 havonta el kell végezni:

- Szemrevételezéssel ellenőrizze az összes látható kötést, valamint a hegesztési varratokat.
- Alaposan tisztítsa meg a készüléket.
- Ellenőrizze az összes csavarkötés szorosságát.
- Ellenőrizze a pedálok épségét és szilárdságát.

Általánosságban:

- A műanyag burkolatot és a keretrészeket szükség szerint rendszeresen tisztítsa meg nedves ruhával és enyhe szappannal, majd törölje újra szárazra.
- A tisztítószeres szórófejes flakonok használata nem megengedett; bebizonyosodott, hogy az egységek soha nem száradnak ki a hozzáférhetetlen helyeken. A rozsdafertőzés ezzel az eljárással nem zárható ki.
- Ügyeljen arra, hogy folyadék ne kerüljön a monitor házába,
- Az eszközök szükséges fertőtlenítéséhez kizárólag mikrofid® sensitive wipes fertőtlenítő kendőket használjon (<http://www.schuelke.com/>).
- A monitor kijelzője túl alacsony kondenzátorfeszültséget mutathat, amelynél a fékárám nélküli működés nem garantálható biztonságosan. A kondenzátort nagyobb terheléssel történő pedálozással vagy a készülék gyártója által jóváhagyott tápegység használatával töltheti fel.
- Ellenőrizze a ház rögzítésének szilárdságát.
- Javasoljuk a készülék minden részének, különösen a csavaroknak, hegesztési varratoknak és egyéb rögzítéseknek a rendszeres szemrevételezéses ellenőrzését.
- Ellenőrizze, hogy a készülék lábai szilárdan állnak-e.
- Csak eredeti pótalkatrészeket használjon - vegye fel velünk a kapcsolatot.

Karbantartás hivatalos szakember által

A készülékkel kapcsolatos olyan problémák esetén, amelyeket nem tud egyszerű módon megoldani, mindig forduljon az emotion fitness szervizhez. A hivatalos szerviz gyorsan és hozzáértően segít Önnek, vagy utasításokat ad.

Kalibrálás/karbantartás

Az elliptikus és lépcsőmászó berendezéseken (kereszt és lépcső) a törvény szerint nem szükséges MTK a kezelő számára. Ez azért van így, mert a testsúly befolyásolja az ezeken a gépeken keletkező teljesítményt. Az emotion fitness GmbH & Co. KG kérésre felajánlja a fékerő kalibrálását.

Ezenkívül javasoljuk, hogy a **karbantartást** a biztonság szempontjából fontos alkatrészek (STÜ) ellenőrzésével együtt **12 havonta végezzék el a** felhatalmazott alkalmazottak/partnerek.

Ez a szakasz a németországi jogi helyzetre vonatkozik. Kérjük, ellenőrizze az Ön országában az orvostechnikai eszközök üzemeltetésére vonatkozó hatályos jogszabályokat.

A "med" utótaggal ellátott készülékek megfelelnek a 93/42/EGK orvostechnikai eszközökről szóló irányelvnek. Így azokon szerepel a CE-jelölés és a bejelentett szervezet száma.

A forgalmazó/üzemeltető felelős a karbantartás, a szervizelés és a kalibrálás, valamint az esetleges ellenőrzések elvégzéséért, a vonatkozó regionális törvényeknek és előírásoknak megfelelően a berendezés helyén!

A helyi hivatalos márkakereskedő további információkat is adhat.

6. Műszaki adatok*

Eszköz típusa	Méret (L/W/H)	Súly	Max. felhasználói súly	Biztonságos munkaterhelés
mozgás lépcső 900	102 cm x 73 cm x 160 cm	79 kg	150 kg	229kg
mozgás lépcső 900				

Ellenállási rendszer: főfékrendszer-független fékrendszer

Teljesítménytartomány: 4-27m/min. Süllyedési sebesség

Szabadonfutó: elérhető

A következő uniós irányelvek teljesülnek:

2001/95/EK általános termékbiztonsági irányelv

93/42/EGK orvostechnikai eszközökről szóló irányelv IIa. osztály (csak a med utótaggal ellátott eszközök esetében teljesül)

2014/30EU EMC-irányelv

A következő szabványokat használták:

DIN EN ISO 20957-1 A pontossági osztály, SH használati osztály; DIN EN ISO 20957-5;

DIN EN 60601-1:2013; DIN EN 60601-1-2

* Az értékek az egységváltozások és opciók miatt változhatnak.

A technikai és optikai változtatások, valamint a nyomdahibák jogát fenntartjuk.

7. Eltávolítás

Az adásvételi szerződés megkötésével elfogadottnak kell tekinteni, hogy az üzleti vevők a következő eszközökkel rendelkeznek

elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében.

8. Garancia

Ez a törvényes jótálláson alapul.

Az emotion fitness GmbH & Co. KG, mint a termék forgalmazója, 12 hónapig ingyenes szervizszolgáltatást nyújt a professzionális felhasználóknak alkatrészekre és munkadíjra vonatkozóan, amennyiben a jelen használati útmutatóban felsorolt megfelelő használat és gondozás igazolható. Az emotion fitness GmbH & Co. KG további 12 hónapig ingyenesen biztosítja a cserealkatrészeket.

A jótállási igény érvényét veszti, ha a terméket illetéktelen személyek szervizelték vagy javították. Amint a garanciális eset bekövetkezik, azonnal írásban vagy e-mailben tájékoztassa erről az emotion fitness GmbH & Co KG-t. A készülék tulajdonosának tájékoztatást kell adnia a készülék sorozatszámáról, a vásárlás időpontjáról, a hiba részletes leírásáról és a beszerzési forrásról.

Az emotion fitness GmbH & Co KG gondoskodik a szolgáltatásról, de fenntartja a jogot a szolgáltatás típusának meghatározására.

A következő eljárások elképzelhetők:

1. a szolgáltatást a helyszínen végzi a szervizünk.
2. elküldjük a kívánt alkatrészt.
3. csereegységet küldünk.

A hibás alkatrészeket az ügyfélnek haladéktalanul vissza kell küldenie hozzánk. Ellenkező esetben a leszállított pótalkatrészeket kiszámlázzuk.

Ha az okok nem tartoznak a garancia hatálya alá, az emotion fitness GmbH & Co. KG fenntartja a jogot a javítási költségek felszámítására.

Egyes kopóalkatrészekre nem vonatkozik a garancia. Ezek különösen a nyereg, a hajtókarok és a hajtókar rögzítése, a pedálok, a pedálhurok, a kárpitszövetek és a kormányon lévő markolat gumija. A **POLAR** pulzusrendszerekre a törvényes garancia vonatkozik.

Ezek a jótállási rendelkezések semmilyen módon nem érintik az általános törvényes igényeket.

Az időről időre módosított Általános szállítási feltételeink megtekinthetők és letölthetők a www.emotion-fitness.de weboldalunkon.

CE 0633

Köszönjük a bizalmat!

emotion
FITNESS

Gyártó

emotion fitness GmbH & Co. KG

Trippstadter Str. 68

67691 Hochspeyer, Németország

Tel +49 (0) 6305-71499-0

Fax: +49 (0) 6305-71499-111

Internet: www.emotion-fitness.de

E-mail: info@emotion-fitness.de

Gyártó EUDAMED SRN: DE-MF-000016584

